

Homedics

Shiatsu rygmassager
med varme



✓ Register your product today at
www.homedics.co.uk/product-registration

3 ÅRS GARANTI

SBM-75H

PRODUKTEGENSKABER:



A / Varm

For at få en beroligende varme, når massagen er tændt, skal du blot trykke på varmeknappen, hvorefter den tilsvarende røde LED-lampe lyser. For at fravælge, skal du trykke på knappen igen, hvorefter den tilsvarende LED-lampe slukker.

Af hensyn til din sikkerhed kan varmen ikke tændes, hvis massage ikke er valgt.

B / TÆND/SLUK-KNAP - For at tænde enheden skal du først trykke på POWER-knappen. LED-indikatoren lyser og bekræfter dit valg. For at slukke enheden skal du blot trykke på knappen igen. LED-indikatoren blinker, mens rygmassagemekanismen vender tilbage til sit laveste punkt, og derefter slukker den.

SHIATSU MASSAGE - En dybt afslappende og fornyende oplevelse opfundet i Japan, hvor rytmisk fingertryk stimulerer 'chi' (vitalenergi) og lindrer stress og spændinger.

C / RETNINGSKNAP

Tryk på retningsknappen for at skifte mellem massageretning med og mod uret.


D / SHIATSU NAKKEMASSAGE - Juster mekanismens højde, så den passer til dine skuldre, ved hjælp af OP- og NED-knapperne. LED-indikatoren blinker, hvis massagemekanismen har nået det højeste/laveste punkt.

E / SHIATSU PROGRAMMER - Vælg mellem 3 forudindstillede programmer, hvor Shiatsu-massagen bevæger sig op og ned i et specifikt område af ryggen. For at vælge et program skal du blot trykke på knappen, hvorefter LED-lampen lyser. For at fravælge, skal du trykke på knappen igen eller trykke på en anden knap.

F / SPOT SHIATSU - Tryk på TARGET-knappen for at stoppe og fokusere Shiatsu-handlingen på ét sted. Du kan justere mekanismens position ved at holde en af retningsknapperne nede, indtil den ønskede position er nået. Pil op vil bevæge mekanismen opad, og pil ned vil bevæge den nedad. Når du slipper knappen, stopper mekanismen på det sted.

G / VIBRATION MESSAGE - Giver en forfriskende vibrationsmassage til overlår/-ben. Tryk på knappen for at skifte mellem lav (standard), medium eller høj.

Fig. 1

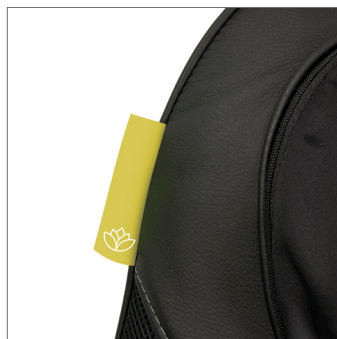

BRUGSANVISNING:

1. Fastgør massageapparatet til næsten enhver stol ved hjælp af den integrerede rem, der er placeret bag på sædet. Sørg for, at det holdes fast på plads ved at justere remmen efter behov.
2. Tilslut strømforsyningen til en 220-240V AC stikkontakt.
3. Når du har sat dig, skal du bruge knappen til at betjene apparatet. Tryk på q-knappen, og vælg den ønskede massagezone for at starte massagen.
4. Tryk på q-knappen for at stoppe massagen.

Fastgørelsessystem

Shiatsu-massageapparatet har et unikt fastgørelsessystem, der gør det muligt at fastgøre det til næsten enhver stol. Du skal blot trække stropperne over sædet eller stolen, og justere fastgørelsessropperne for at sikre det. Dit massageapparat glider ikke væk.

Bemærk: Brug ikke dette produkt i mere end 15 minutter ad gangen. Den bevægelige dobbelte massagemekanisme på bagsiden "parkerer" eller afslutter altid i sin laveste position. Den fortsætter i denne position, efter at strømmen er slukket. Hvis strømforsyningen afbrydes, og strømmen genoprettes, vil mekanismen "parkere" eller bevæge sig til sin laveste position.

Brug af æteriske olier med aromafanen (fig. 1)

Hæld forsigtigt et par dråber olie på aromafanen, så duften frigives i luften. Jo flere dråber, desto stærkere er duften.

VEDLIGEHOLDELSE:

Rengøring

Tag stikket ud af apparatet, og lad det køle af, før du rengør det. Rengør kun med en blød, let fugtig svamp.

- Lad aldrig vand eller andre væsker komme i kontakt med apparatet.
- Må ikke nedsænkes i væske for at rengøre.
- Brug aldrig slibende rengøringsmidler, børster, glas-/møbelpolish, fortynder osv. til rengøring.

Opbevaring

Placer apparatet i dets kasse eller et sikkert, tørt og køligt sted. Undgå kontakt med skarpe kanter eller spidse genstande, der kan skære eller punktere stoffets overflade. For at undgå brud må du IKKE vikle netledningen rundt om apparatet. Hæng IKKE enheden op i ledningen.

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL FREMTIDIG REFERENCE.

Tag ALTID stikket ud af stikkontakten umiddelbart efter brug og før rengøring. For at afbryde apparatet skal du dreje alle knapper til 'OFF'-positionen og derefter tage stikket ud af stikkontakten.

- Efterlad ALDRIG et apparat uden opsyn, når det er sat i stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og før du sætter dele eller tilbehør på eller af.

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktioner i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

- Placer eller opbevar ikke apparatet, hvor det kan falde eller blive trukket ned i et badekar eller en vask. Placer eller tab ikke apparatet i vand eller anden væske.

- Ræk IKKE efter et apparat, der er faldet i vand eller andre væsker. Sluk for apparatet, og tag det straks ud. Opbevares tørt – MÅ IKKE bruges under våde eller fugtige forhold.

- Sæt ALDRIG stifter, metalbeslag eller genstande ind i apparatet eller nogen åbninger.

- Brug dette apparat til det tilsigtede formål som beskrevet i denne brochure. Brug IKKE tilbehør, der ikke er anbefalet af HoMedics.

- Brug ALDRIG apparatet, hvis det har en beskadiget ledning eller stik, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er blevet tabt eller beskadiget, eller hvis det er blevet tabt i vand. Returner det til HoMedics Servicecenter for eftersyn og reparation.

- Hold ledningen væk fra varme overflader.
- Brug IKKE, hvor aerosol (spray) produkter anvendes, eller hvor der administreres ilt.
- Brug IKKE under tæpper eller puder. Overophedning kan forekomme og forårsage brand, elektrisk stød eller personskaade.
- Bær IKKE apparatet ved ledningen eller brug ledningen som håndtag.
- Brug IKKE udendørs.
- Knus IKKE. Undgå skarpe folder.
- Dette produkt kræver en 220-240 V AC strømforsyning.
- Forsøg IKKE at reparere apparatet. Der er ingen dele, som brugeren kan reparere. Al service på dette apparat skal udføres på et autoriseret HoMedics Servicecenter.
- Sid IKKE eller stå på massage (ryg) delen af apparatet. Enheden bør kun bruges, når den er fastgjort til en stol med ryggen i lodret position.
- Bloker aldrig luftåbningerne på apparatet. Hold luftåbningerne fri for fnug, hår osv.
- Forbrændinger kan opstå ved forkert brug.
- Bagsnoren bør kun bruges til at holde puden på plads mod en stoleryg, hvor dette er muligt. Den er ikke beregnet til andre anvendelser.
- Anbefales ikke til brug på træoverflader, da lynlåsen kan beskadige træet. Forsigtighed anbefales også ved brug på polstrede møbler.
- Anbefales ikke til brug på lædermøbler.
- Sørg for, at alt hår, tøj og smykker holdes væk fra massage mekanismen eller andre bevægelige dele på produktet til enhver tid.
- Hvis du har nogen bekymringer vedrørende dit helbred, bør du kontakte en læge, før du bruger dette apparat.
- Dette er et ikke-professionelt apparat, der er designet til personlig brug og beregnet til at give en lindrende massage til slidte muskler. MÅ IKKE bruges som erstatning for lægehjælp.

- Dette er et ikke-professionelt apparat, designet til personlig brug og beregnet til at give en beroligende massage til trætte muskler. MÅ IKKE bruges som erstatning for lægehjælp.
- Brug af dette produkt bør være behageligt og komfortabelt. Hvis smerte eller ubehag opstår, skal du stoppe brugen og kontakte din læge.
- Gravide kvinder, diabetikere og personer med pacemakere bør konsultere en læge før brug af dette apparat. Ikke anbefalet til personer med sensoriske mangler, inklusive diabetisk neuropati.
- MÅ IKKE bruges på spædbørn, personer med handicap eller på en sovende eller bevidstløs person. MÅ IKKE bruges på ufølsom hud eller på personer med dårlig blodcirkulation.
- Dette apparat bør ALDRIG bruges af nogen, der lider af en fysisk lidelse, der begrænser brugerens evne til at betjene kontrolknapperne.
- ALDRIG bruge direkte på hævede eller betændte områder eller hududslæt.
- MÅ IKKE bruges før sengetid. Massagen har en stimulerende effekt og kan forsinke søvnen.
- Brug ikke apparatet længere end den anbefalede tid.
- Kun let kraft bør anvendes mod massagefunktionerne for at undgå risiko for skade.
- Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, der er ufølsomme over for varme, skal være forsigtige ved brug af apparatet.
- Manglende overholdelse af ovenstående kan resultere i risiko for brand eller skade.

Homedics

Distribueret i Storbritannien af

FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

EU Importør

FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland

Kundeservice: +44(0) 1732 378557 | support@homedics.co.uk

IB-SBM75HGB-0622-01

