



VÆGT MED KROPSANALYSE

BRUGSANVISNING

Model: 100450444



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.



FORHOLDSREGLER

1. Personer med elektroniske medicinske enheder bør ikke bruge denne vægt.
 - Implantérbare medicinske elektroniske enheder som pacemakere, kunstige hjerter og andre medicinske elektroniske apparater.
 - Bærbare medicinske elektroniske apparater som elektrokardiografer.
2. Konsulter en læge, hvis du er i tvivl om du kan tåle de små elektriske impulser (hvis du f.eks. er gravid, tager hjertemedicin, i dialysebehandling mm.)
3. Hop ikke på vægten.
4. Placer ikke mere end 180 kg på apparatet, da det kan beskadige apparatet.
1. Mål dig på samme tidspunkt og under samme forhold hver dag for nøjagtige resultater.
2. For at sikre præcise målinger skal vægten placeres på et hårdt og jævnt gulv.
3. Hvis der er stor afvigelse i vægten, kan du prøve at geninstallere batterierne.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- **Model:** 100450444
- **Mål:** 345 x 321 x 42 mm
- **Vægtområde:** 0,2-180 kg (0,4-396 lb)
- **Displaytype:** LED
- **Viser (på LED-display):** Vægt, Fedtprocent, Vandprocent, Muskelmasse, Knoglemasse, Visceralt fedt, BMI m.m.
- **Batterier:** 3 x 1,5V AAA
- **Arbejdsstrøm:** ≤ 45 mA
- **Datatransmission:** Bluetooth
- **Elektrodemetode:** Tetrapolær 8-punkts berøringselektroder


VÆGT MED KROPSANALYSE

BRUGSANVISNING

UDSEENDE


Forside af produktet:

- 1 Håndelektroder
- 2 Håndtag med kabel
- 3 Display
- 4 Fodelektroder

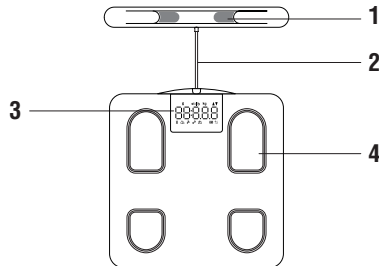


Bagside af produktet:

- 1 Håndelektroder
- 2 Port til håndtagskabel
- 3 Batterirum

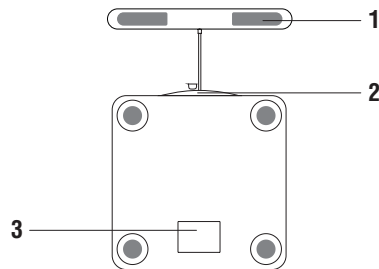


Isætning af batterier:

- Træk batteriisolatoren ud på bagsiden for at tænde vægten.

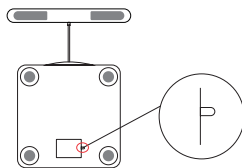

- Når displayet viser "Lo", betyder det, at batteriet er lavt, og det skal udskiftes (3 x 1,5V AAA-batterier).

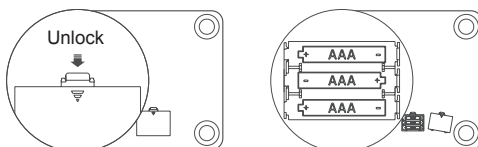



BRUG AF APPEN

DOWNLOAD APPEN:

- Scan QR-koden eller søg efter "Feelfit" i App Store eller Google Play for at downloade appen.



PARRING OG MÅLING:

- 1 Åbn Feelfit-appen, tænd for Bluetooth (for Android 6.0 og nyere skal lokalitet aktiveres).


Klik på "Min enhed" og vælg CS10E.



- 2 Træd på vægten med bare, tørre fødder.



- 3 Vælg enheden på parringssiden

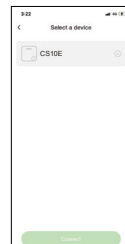

- 4 Hold i håndtaget i 10-15 sekunder. Når dine data vises i appen, er målingen fuldført.



- 5 Nu kan du se dine målinger og detaljerede rapporter i appen.








VÆGT MED KROPSANALYSE

BRUGSANVISNING

KORREKT MÅLEPOSITION

ARMPOSITION:

- Armene skal bøjes let indad.
- Undgå for høje eller for lave armstillinger.
- Hold ikke håndtaget i en knyttet næve.

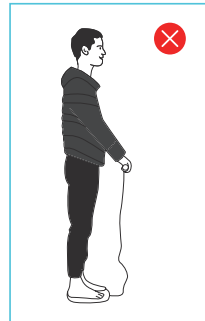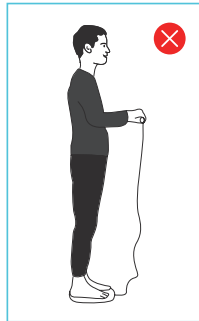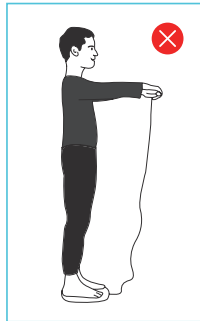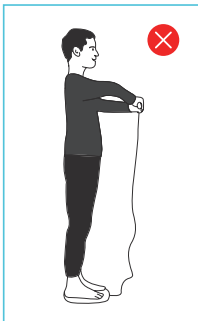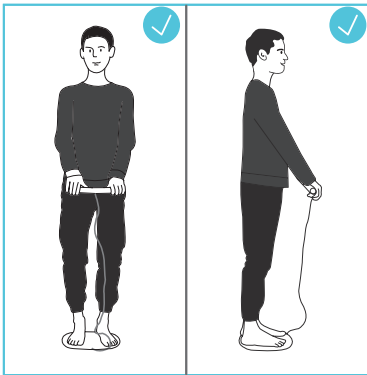




FODPOSITION:

- Træd på vægten med bare fødder.
- Fødder og lår må ikke røre hinanden.
- Hælene må ikke røre hinanden eller pege indad.



HÅNDPOSITION:




- Placer tommelfingrene på de ovale elektroder og de fire fingre på de aflange elektroder.
- Håndtagskablet skal vende nedad.

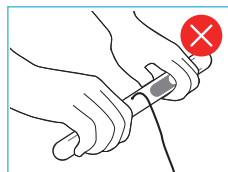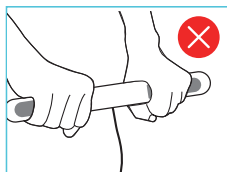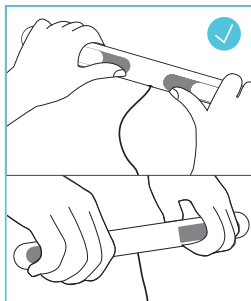

VÆGT MED KROPSANALYSE

BRUGSANVISNING

DISPLAYIKONER OG BESKRIVELSER

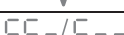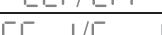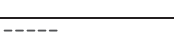	• Bluetooth-ikon: Lyser, når Bluetooth er aktiv.
	• Kropsfedt%: Viser fedtprocent.
	• Kropsvand: Viser vandprocent.
	• Muskelmasse: Viser muskelmasse.
	• Knoglemasse: Viser knoglemasse.
	• Visceralt fedt: Viser niveau af indre fedt.
	• BMI-ikon: Viser Body Mass Index.
	
	• Lavt batteri: Viser batteriadvarel.
	
	• Dataindikatorer: Pil op/ned indikerer ændringer i data.
	• Overbelastningsadvarel: Viser hvis vægten er overbelastet.
	• Ustabil måling: Viser hvis vægten ikke er stabil.
	• Der er stadig registreret vægtværdi efter vejning
	• Håndtagspåmindelse: Husk at lægge håndtaget på plads efter brug.



REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

