

**HOMEDICS®**  
BEAUTY

# SmootheelR



**3 ÅRS GARANTI**

CELL-600-EU




Register your product today at  
[www.homedics.co.uk/product-registration](http://www.homedics.co.uk/product-registration)

## Introduktion til Smoothee IR

Smoothee IR fungerer på samme princip som den traditionelle kinesiske praksis med cupping, hvor der skabes et vakuum, der trækker huden op i en glat kop og giver en dyb vævsmassage. Smoothee IR forenkler denne teknik ved at anvende en elektronisk styret pumpe til at skabe vakuumet, som forbedres med blid infrarød (IR) varme. Påføring af vakuumet og infrarød varme på områder med cellulite hjælper med at løse og sprede fedtdepoterne i det connective vævslag og skaber en glattere overflade. Ved at bruge kølehovedet i et par minutter efter hver behandling, vil din hud også føles dejligt beroliget.

## LÆR DIN ENHED AT KENDE

1. 3 LED
2. Strømknop
3. + / - Knapper
4. Rem
5. USB-opladningsstik
6. Kølende Hoved
7. Stor Kop
8. Medium Cup
9. Small Cup
10. Massage fingre
11. Udskifteligt filtfilter
12. USB-kabel

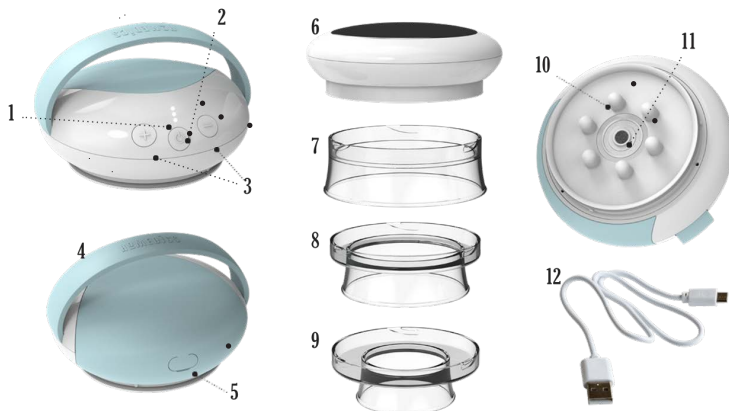

## OPLADNING AF ENHEDEN


1. Oplad din enhed ved at tilslutte den til en USB-strømkilde ved hjælp af den medfølgende 'USB til Type C' ledning. LED'erne på forsiden af produktet lyser sekventielt under opladning. Når alle 3 LED'er lyser kontinuerligt, er produktet fuldt opladet og bør afbrydes fra strømkilden.
2. En opladning på 4 timer\* giver op til 3 timers trådløs brug.
3. Når enheden tændes, blinker alle 3 LED'er 5 gange, hvis batteriet er lavt og skal oplades.



\*Baseret på brug af en 1A USB-strømadapter (medfølger ikke)


## RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk enheden og fjern opladningsledningen før rengøring.
- Fjern koppen ved at dreje mod uret. Kopperne kan vaskes i varmt sæbevand. Tør dem grundigt, før de opbevares.
- Tør eventuel overskydende olie fra enheden og kølehovedet med en let fugtig klud og tør straks.
- VASK ELLER DYP IKKE enheden eller kølehovedet.
- Efter 3-4 ugers brug fjernes filtfilteret forsigtigt med pincet og udskiftes med et nyt filter (medfølger).
- Opbevar alle dele i deres originale æske for sikker opbevaring.

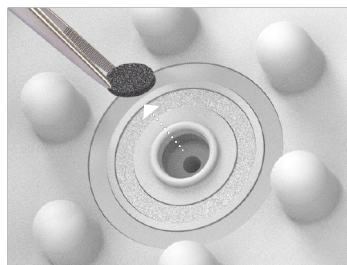


## KOPPEBEHANDLING

- Kopperne er designet til at blive brugt på let olieret hud. Vi anbefaler en let påføring af simpel babyolie, olivenolie eller flydende kokosolie på huden før behandlingen. Undgå venligst parfumerede olier, da disse kan beskadige/farve plastoverflader. Brug ikke på uolieret hud.
- Hvis du ved, at du har tendens til at få blå mærker let, kan du vælge at udføre en plastertest på et lille område før den fulde behandling for at vurdere effekten på din hud. Som med enhver vakuum-kop-behandling kan der opstå midlertidige blå mærker på det behandlede område, men disse bør forsvinde inden for få dage.
- Fastgør din valgte kop til enheden ved at finde tappene og dreje dem på plads. De større kopper er generelt egnede til områder som lår og bagdel, og de mindre kopper til områder som arme og lægge.
- Placer hånden under silikoneremmen og tryk på tænd/sluk-knappen. Dette aktiverer vakuumsug og IR-varme samtidig. Der er 3 niveauer af kontinuerligt sug og et af intermitterende sug som indikeret af de 3 LED'er. Tryk på + og - knapperne for at ændre niveauer. Intermitterende sug er den mildeste indstilling og er indikeret ved en enkelt LED, der pulserer tændt og slukket. Bemærk: der er ingen IR-varme på denne mildeste indstilling.
- Vi anbefaler at starte med enten intermitterende eller lavt kontinuerligt sug, mens du vænner dig til enheden. Placer enheden på huden og begynd straks at bevæge den langsomt i cirkler eller frem og tilbage over det område, der skal behandles, og sørg for at opretholde kontakt mellem koppen og huden. Der er ikke behov for at lægge pres, men sørg for at holde enheden i bevægelse hele tiden. Hvis suget føles for stærkt eller hvis det er svært at holde enheden i bevægelse, tryk på tænd/sluk-knappen for at frigive vakuummet. Start igen på et lavere intensitetsniveau og/eller med en større kop. Ved normal brug vil du se og føle huden blive trukket op i koppen og hen over massagefingrene.
- For at stoppe behandlingen når som helst, tryk blot på tænd/sluk-knappen for at frigive vakuummet.
- Behandling af hvert område tager normalt omkring 3-5 minutter. Behandl op til 3 gange om ugen den første uge og opbyg til en gang om dagen, hvis ønsket. Huden vil typisk begynde at se glattere ud efter blot et par uger.
- Behandl aldrig områder med irriteret eller brudt hud, eller over åreknuder eller modermærker.
- Hvis blå mærker opstår, anbefales det altid at vente på, at disse falder, før man behandler det samme område igen.
- Fjern koppen efter brug ved at dreje mod uret.

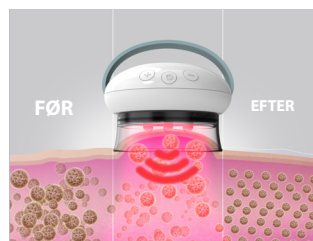

## AFKØLENDE BEHANDLING

- Efter at have fjernet koppen fra enheden, fastsæt kølehovedet ved at finde hakkerne og dreje det på plads.
- Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere kølingen. Den rustfrie stålflade begynder straks at køle ned. Brug + og - knapperne til at justere køletemperaturen, så den føles behagelig for dig. Niveau 3 (3 LED'er tændt) er det koldeste.
- Påfør forsigtigt den kolde overflade på huden og bevæg den langsomt over hele det behandlede område. Fortsæt med denne behandling i et par minutter for at berolige og stramme huden. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke.

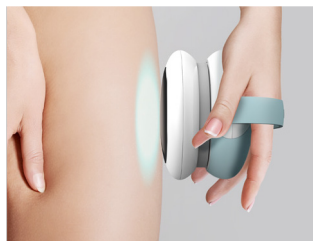

**VENLIGST BEMÆRK:** Automatisk slukning sker efter 10 minutters køling. Hvis yderligere køletid er nødvendigt, kan enheden tændes igen for en ny 10-minutters session.

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR  
BRUG. GEM DISSE INSTRUKTIONER  
FOR FREMTIDIG REFERENCE.

---

- Dette apparat kan bruges af børn fra 14 år og op samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktioner om sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Placer ikke eller opbevar apparatet et sted, hvor det kan falde eller blive trukket ned i et bad eller en vask. Undgå at placere eller tage det i vand eller anden væske.
- Ræk ikke efter et apparat, der er faldet i vand eller andre væsker. Hold det tørt – brug det ikke i våde forhold.
- Indsæt aldrig nåle, metalbeslag eller genstande i apparatet eller nogen åbning.
- Brug dette apparat til det formål, der er beskrevet i denne booklet. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af HoMedics.
- Brug aldrig apparatet, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er blevet tabt eller beskadiget, eller er faldet i vand. Returnér det til HoMedics Servicecenter for undersøgelse og reparation.
- Forsøg ikke at reparere apparatet. Der er ingen dele, som brugeren kan servicere. Al vedligeholdelse af dette apparat skal udføres på et autoriseret HoMedics Servicecenter.
- 
- Sørg for, at hår, tøj og smykker altid holdes væk fra produktet.
- Hvis du har nogen sundhedsmæssige bekymringer, skal du konsultere en læge inden brug af dette apparat.
- Anvendelsen af dette produkt skal være behagelig og komfortabel. Hvis der opstår smerter eller ubehag, skal du stoppe brugen og kontakte din læge.
- Gravide kvinder, diabetikere og personer med pacemaker bør konsultere en læge inden brug af dette apparat. Ikke anbefalet til personer med sensoriske mangler, inklusive diabetisk neuropati.
- Brug ikke på spædbørn, personer med handicap, eller på sovende eller bevidstløse personer. Brug ikke på ufølsom hud eller personer med dårlig blodcirkulation.
- Dette apparat bør aldrig anvendes af personer med fysiske lidelser, der begrænser deres evne til at betjene kontrollen.
- Brug aldrig direkte på hævede eller betændte områder eller hududslæt.
- Brug ikke på irriteret, solskoldet eller sprukken hud, eller på områder med dermatologiske problemer
- Anvend ikke over vorter, modermærker eller åreknuder.
- Brug ikke længere end den anbefalede tid.
- Dette produkt indeholder et genopladeligt batteri og bør ikke udsættes for overdreven varme. Lad det ikke ligge i direkte sollys eller nær en varmekilde som ild. Batteriet må ikke udskiftes af brugeren.
- Hvis ovenstående ikke følges, kan der være risiko for brand eller skade.

## 3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer dette produkt mod material- og håndværksfejl i en periode på 3 år fra købsdatoen, med undtagelse af nedenstående punkter. Denne garanti fra FKA Brands Ltd dækker ikke skader forårsaget af misbrug eller forkert anvendelse; uheld; tilføjelse af uautoriseret tilbehør; ændringer af produktet; eller andre forhold, der er uden for FKA Brands Ltd's kontrol. Garantien er kun gyldig, hvis produktet er købt og anvendt i UK/EU. Et produkt, der kræver ændring eller tilpasning for at kunne fungere i et andet land end det, det er designet, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret til, eller reparation af produkter beskadiget af disse ændringer, er ikke dækket af denne garanti. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for nogen form for tilfældige, følgeskader eller specielle skader.

For at få garantiservice på dit produkt, skal du returnere produktet forudbetalt til dit lokale servicecenter sammen med din daterede kvittering (som bevis for køb). Når det er modtaget, vil FKA Brands Ltd reparere eller erstatte dit produkt efter behov og returnere det til dig forudbetalt. Garantien gives udelukkende gennem HoMedics servicecenter. Service af dette produkt af nogen anden end HoMedics servicecenter ugyldiggør garantien. Denne garanti påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

For dit lokale HoMedics Servicecenter, gå til  
**[www.homedics.co.uk/servicecentres](http://www.homedics.co.uk/servicecentres)**

### Batteriudskiftning

Dit produkt indeholder et genopladeligt batteri, der er designet til at holde produktets levetid. Skulle du mod forventning have brug for et nyt batteri, bedes du kontakte kundeservice, som vil give oplysninger om garantien og ikke-garantiservice for batteriudskiftning.

### Batteridirektiv



Dette symbol angiver, at batterier ikke må bortskaffes med husholdningsaffald, da de indeholder stoffer, der kan være skadelige for miljøet og sundheden. Venligst bortskaff batterier på de dertil indrettede indsamlingssteder.

### Forklaring på WEEE



Dette mærke angiver, at dette produkt ikke bør bortskaffes med andet husholdningsaffald i hele EU. For at undgå mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret affaldshåndtering, genbrug det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materialeressourcer. For at returnere din brugte enhed, bedes du anvende retursystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt til miljøvenlig genbrug.

# HOMEDICS<sup>®</sup>

## BEAUTY

Distribueret i Storbritannien af

FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

**EU Importør**

FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland

Kundeservice: +44(0) 1732 378557 | support@homedics.co.uk

IB-CELL600EU-0221-01

